

SHINWA

FRESH FLASH

INFORMATION


VOL.41, MAY 2004

LC-MS対応 有機酸分析専用 HPLCカラム

ULTRON PS-80H 250 L × 2.0 mm I.D.


強酸性カチオン交換樹脂を充填した有機酸分析専用 HPLCセミマイクロカラムです。
溶媒消費量を低減でき、耐久性や再現性に優れており、LC-MSや微量分析に最適です。

Analysis of aliphatic organic acid (脂肪族有機酸の分析)

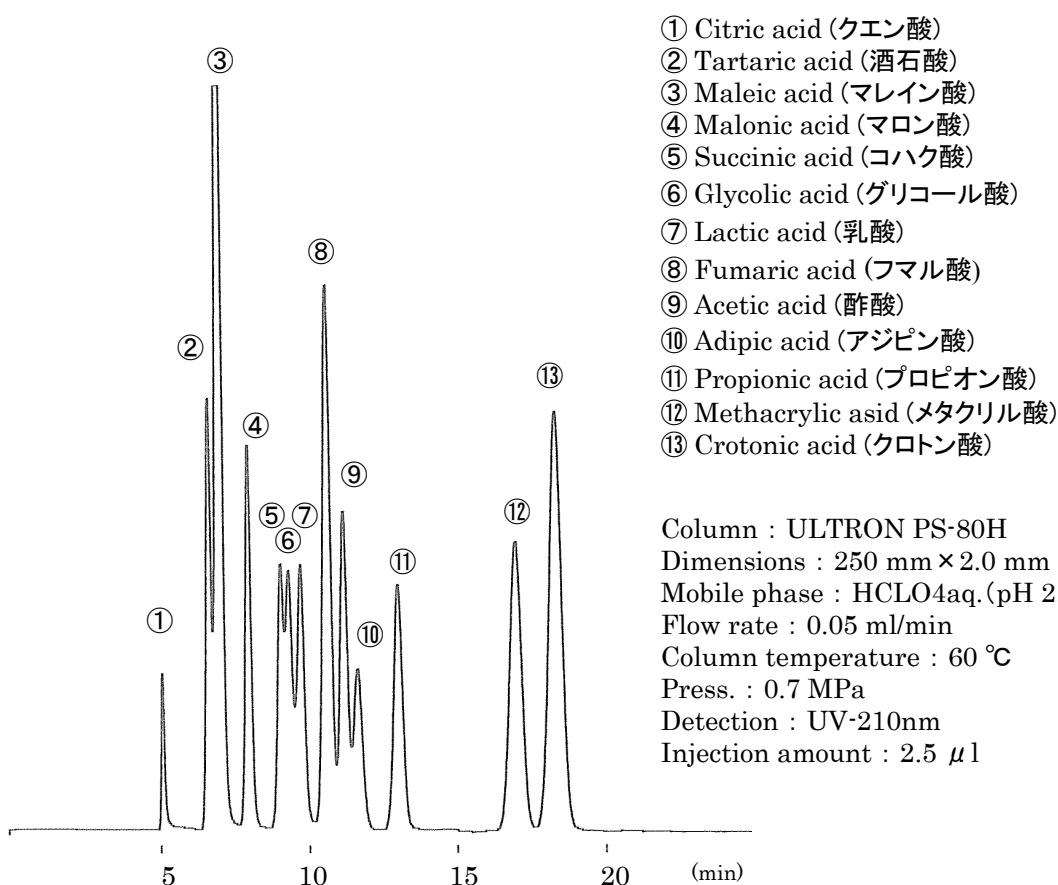

Mass chromatograms obtained by TIC of 11 carboxylic acids.

(データ提供、高知大学 蒲生先生)

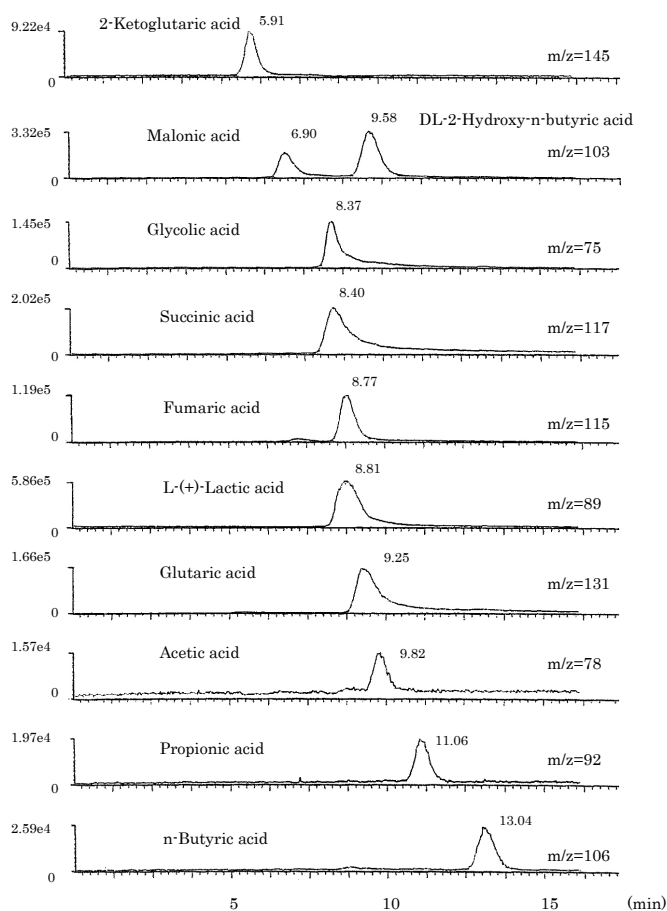

Column : ULTRON PS-80H
 Dimensions : 250 mm L × 2.0 mm I.D.
 Mobile phase : 0.1% Formic acid (pH 2.3)
 Flow rate : 0.07 ml/min
 Column temperature : 55°C
 Detection : ESI positive and negative, range: m/z 50~350

価格表

品名	粒子径	カラムサイズ	価格(円)
ULTRON PS-80H	10 μm	250 L x 2.0 mm I.D.	120,000
ULTRON PS-80H	10 μm	300 L x 8.0 mm I.D.	180,000
ULTRON PS-80H-G	10 μm	50 L x 8.0 mm I.D.	40,000

仕様及び価格は改良のため予告なく変更させていただく場合がございます。予めご了承下さい。

発売元

取扱店

 **島津ジーエルシー**

株式会社島津ジーエルシー

東日本営業部

〒110-0016 東京都台東区台東2-7-1 安藤ビル3F

TEL 03-5812-3821 FAX 03-5812-3827

西日本営業部

〒530-0038 大阪市北区紅梅町6-20 倉橋ビル4F

TEL 06-6242-2620 FAX 06-6357-0760

