

# FRESH FLASH

INFORMATION


VOL.54, May, 2009


## STR ODS-

アセトニトリルの使用量を削減する手段として、一般的に使用されている内径4.6mmのカラムを内径3.0mmにダウンサイジングするだけで、約60%の移動相の削減が図れます。

流量を変更すると、ほぼ同じ保持時間でピークを得ることができます。

カラムサイズの変更および移動相の削減に伴い、コストをより一層抑えることが可能です。

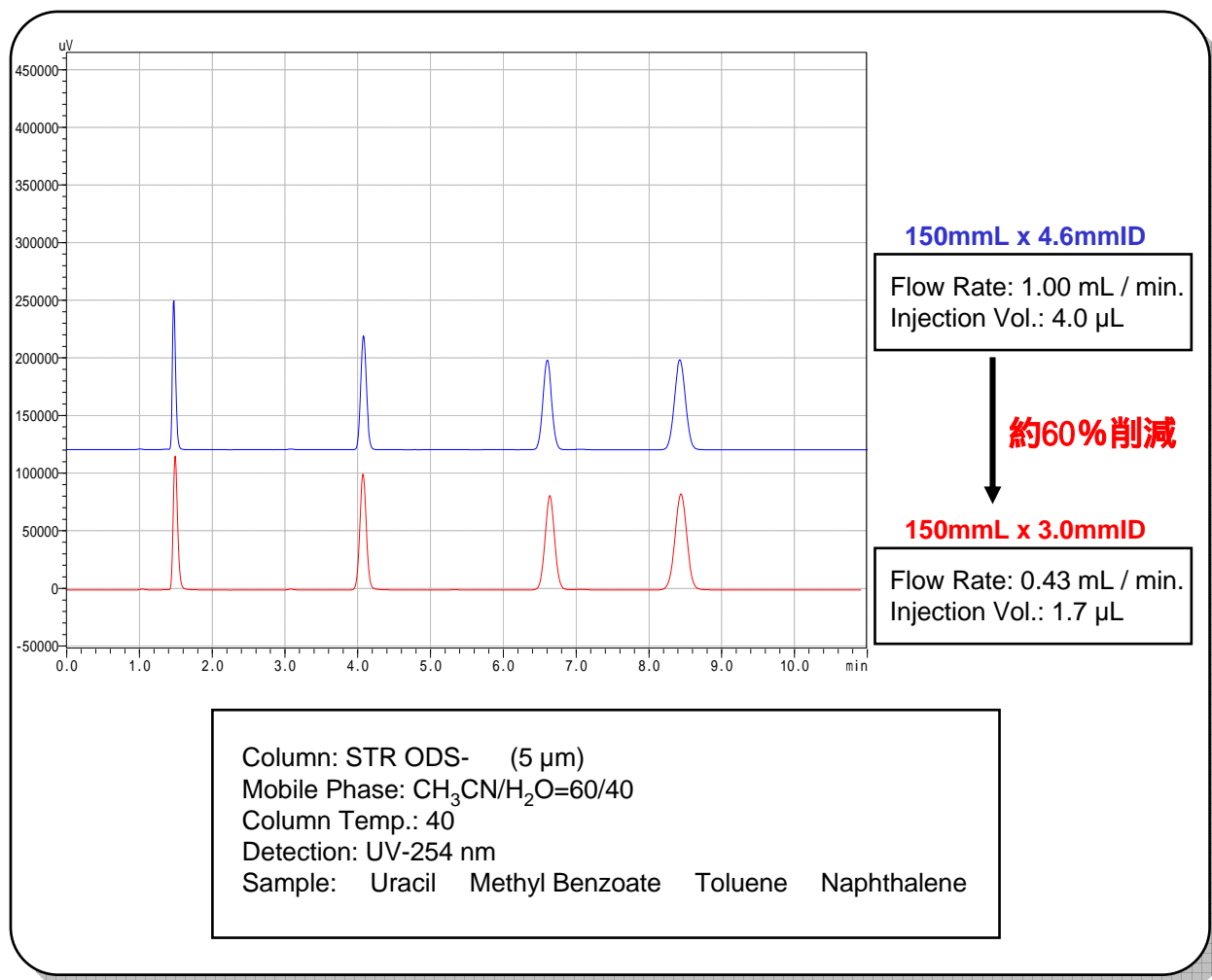

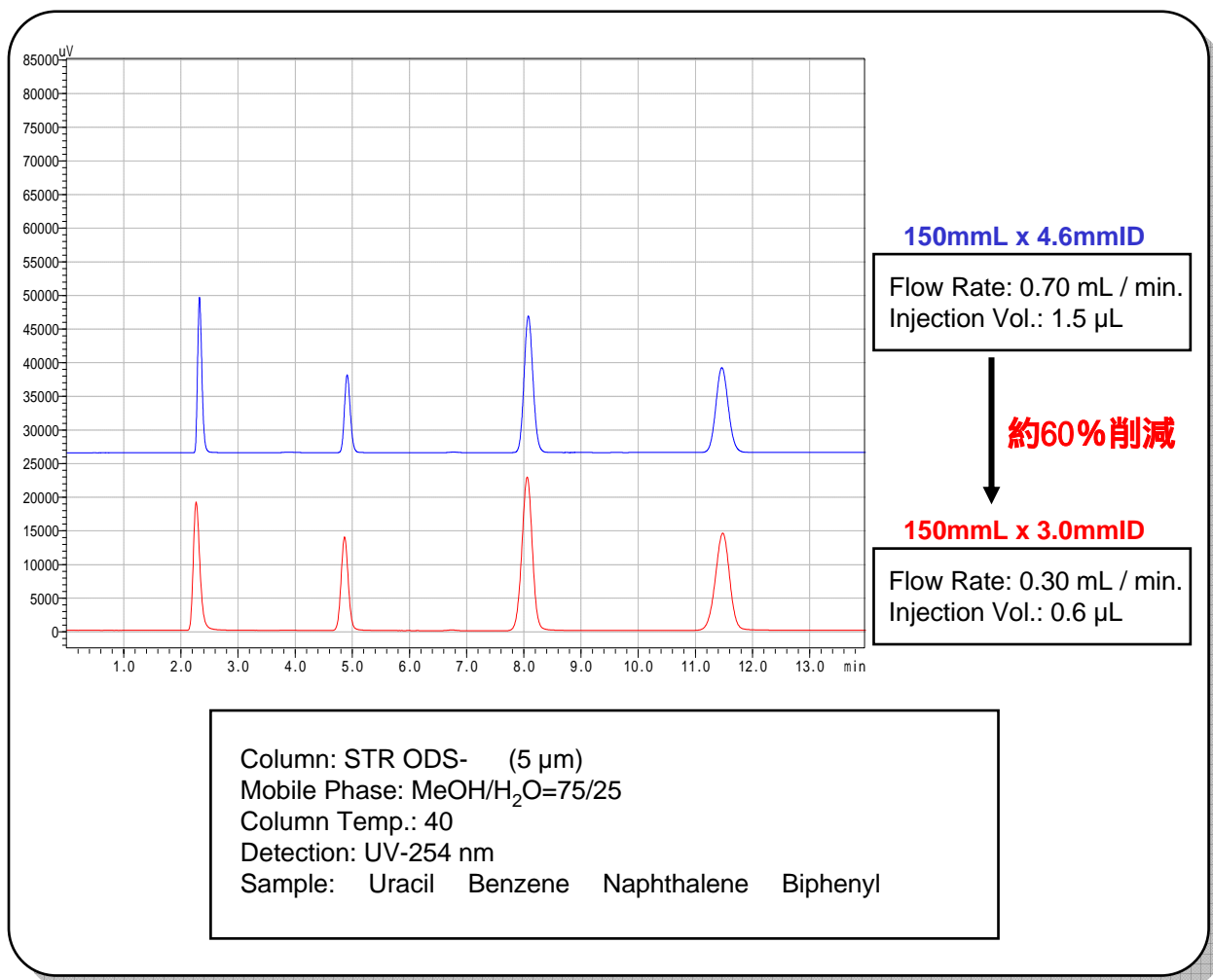

細い配管内径に変更したり、セミマイクロ用フローセルに変更することにより試料拡散が小さくなり、理論段数の向上が図れます。

### 価格表

品名	粒径	カラムサイズ (長さ x 内径)	価格
STR ODS-	5	150 x 3.0 mm	46,000 円
		250 x 3.0 mm	50,000 円
STR ODS- ガードカートリッジ(2個入り)		10 x 3.0 mm	22,000 円
ガードカートリッジ用ホルダー(アダプター付)		10 x 3.0 mmカラム用	26,000 円

仕様及び価格は改良のため予告なく変更させていただくことがございます。予めご了承下さい。

発売元

取扱店



株式会社島津ジーエルシー

東日本営業部

〒110-0016 東京都台東区台東2-7-1 安藤ビル3F

TEL 03-5812-3821 FAX 03-5812-3827

西日本営業部

〒530-0038 大阪市北区紅梅町6-20 倉橋ビル4F

TEL 06-6242-2620 FAX 06-6357-0760