


SHINWA EXPRESS

Application

2019
August
VOL. 159

使用ULTRON AF-HILIC-CD (HT-PLSS*) 柱和 LC/MS/MS检测未衍生化氨基酸

* PLSS: PEEK-Lined stainless steel column

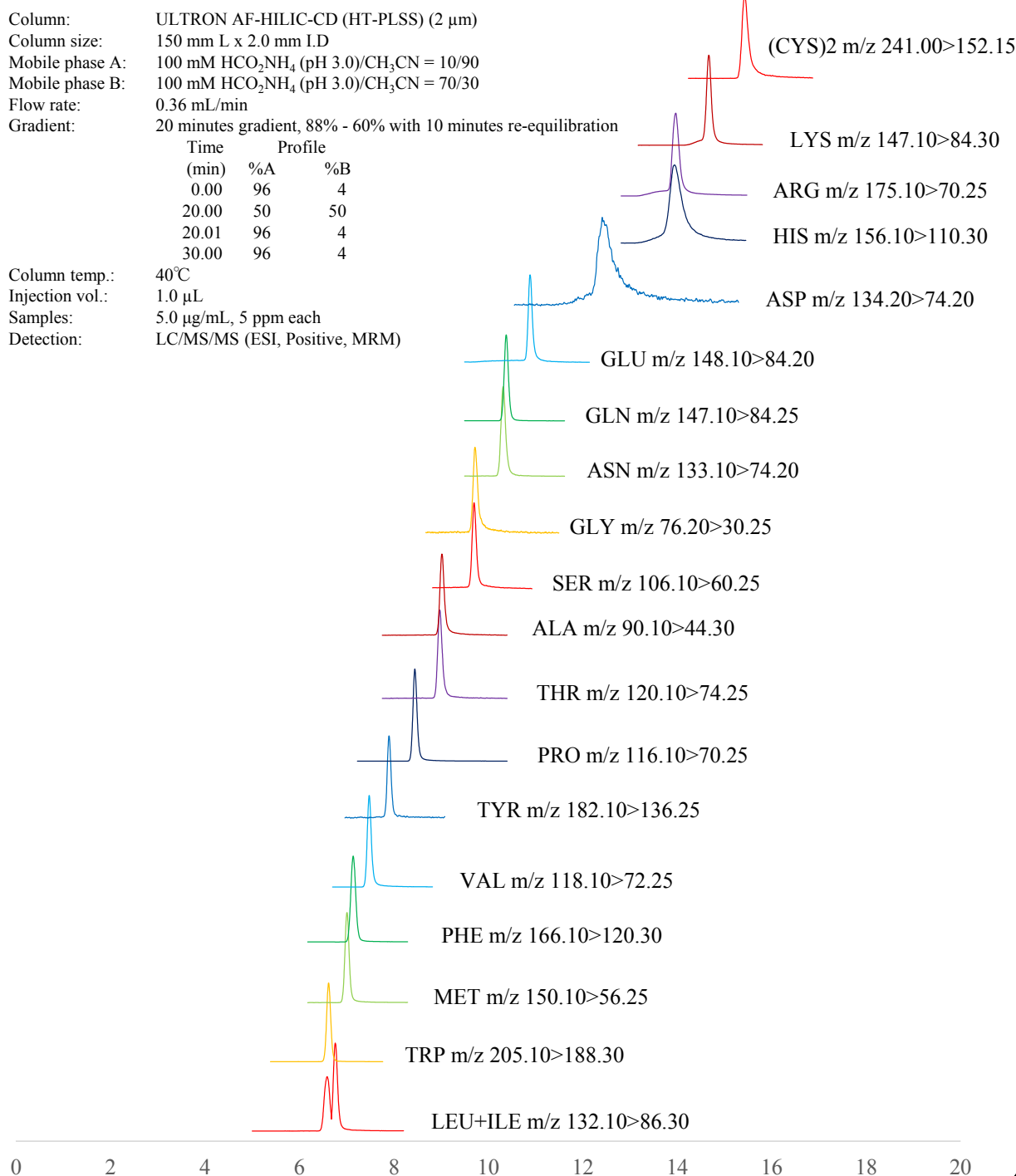

●ULTRON AF-HILIC-CD的特点

1. ULTRON AF-HILIC-CD是化学键合β-环糊精的HILIC柱。
- 2.分子结构的选择性高。
- 3.可以分析从酸性至中性化合物的结构异构体和结构类似物的高分辨分离。
- 4.可以抑制席夫碱形成和异头物分离，所以适合于糖分析的定性与定量测定。

■ ULTRON AF-HILIC系列的规格 ■

ULTRON AF-HILIC-CD (HT)

名称	粒径 (μm)	柱尺寸 长度 × 内经 (mm)
ULTRON AF-HILIC-CD (HT)	2	50 × 2.0
		100 × 2.0
		150 × 2.0
		50 × 3.0
		100 × 3.0
		150 × 3.0
ULTRON AF-HILIC-CD (HT-PLSS*)	2	50 × 2.0
		100 × 2.0
		150 × 2.0
ULTRON AF-HILIC-CD (HT) (Two Guard Cartridges)		5 × 2.0
Holder for Guard Cartridge (with Adaptor)	For 5 × 2.0 mm column	

* PLSS: PEEK-Lined stainless steel column

ULTRON AF-HILIC-CD

名称	粒径 (μm)	柱尺寸 长度 × 内经 (mm)
ULTRON AF-HILIC-CD	5	100 × 2.0
		150 × 2.0
		100 × 4.6
		150 × 4.6
		250 × 4.6
		10 × 4.0
ULTRON AF-HILIC-CD.G		5 × 2.0
ULTRON AF-HILIC-CD (Two Guard Cartridges)		10 × 4.6
Holder for Guard Cartridge (with Adaptor)	For 5 × 2.0 mm column	
	For 10 × 4.6 mm column	

ULTRON AF-HILIC-DA

名称	粒径 (μm)	柱尺寸 长度 × 内经 (mm)
ULTRON AF-HILIC-DA	5	100 × 2.0
		150 × 2.0
		100 × 4.6
		150 × 4.6
		250 × 4.6
		5 × 2.0
ULTRON AF-HILIC-DA (Two Guard Cartridges)		10 × 4.6
Holder for Guard Cartridge (with Adaptor)	For 5 × 2.0 mm column	
	For 10 × 4.6 mm column	

※ 如需其他色谱柱尺寸，请联系我们。
本公司提供关于分析技术的咨询服务。

本公司秉承不断改良产品之宗旨,如产品规格及价格有变动,恕不另行通知。