

水仙の香り

水仙 (スイセン)

学名: Narcissus


分類: ヒガンバナ科スイセン属

地中海沿岸原産の多年草で、日本には平安末期に中国から渡来したといわれています。ギリシア神話で、美少年ナルシッサスが水面に映る我が姿に見とれ、そのまま花になってしまったのが水仙だということです。自分の美貌に酔いしれる人をナルシストと呼ぶのもここから来ているといわれています



NeedlEx 有機溶剤用 (100 mL濃縮)

Column : ULBON HR-1 30 m x 0.32 mm I.D. 0.25 μ m
Column temp : 50 ~ 200 Program rate 5 /min
Split ratio : 10 : 1
Injection : 200
Detector : FID (250)
Carrier gas : He, 2.4 mL/min

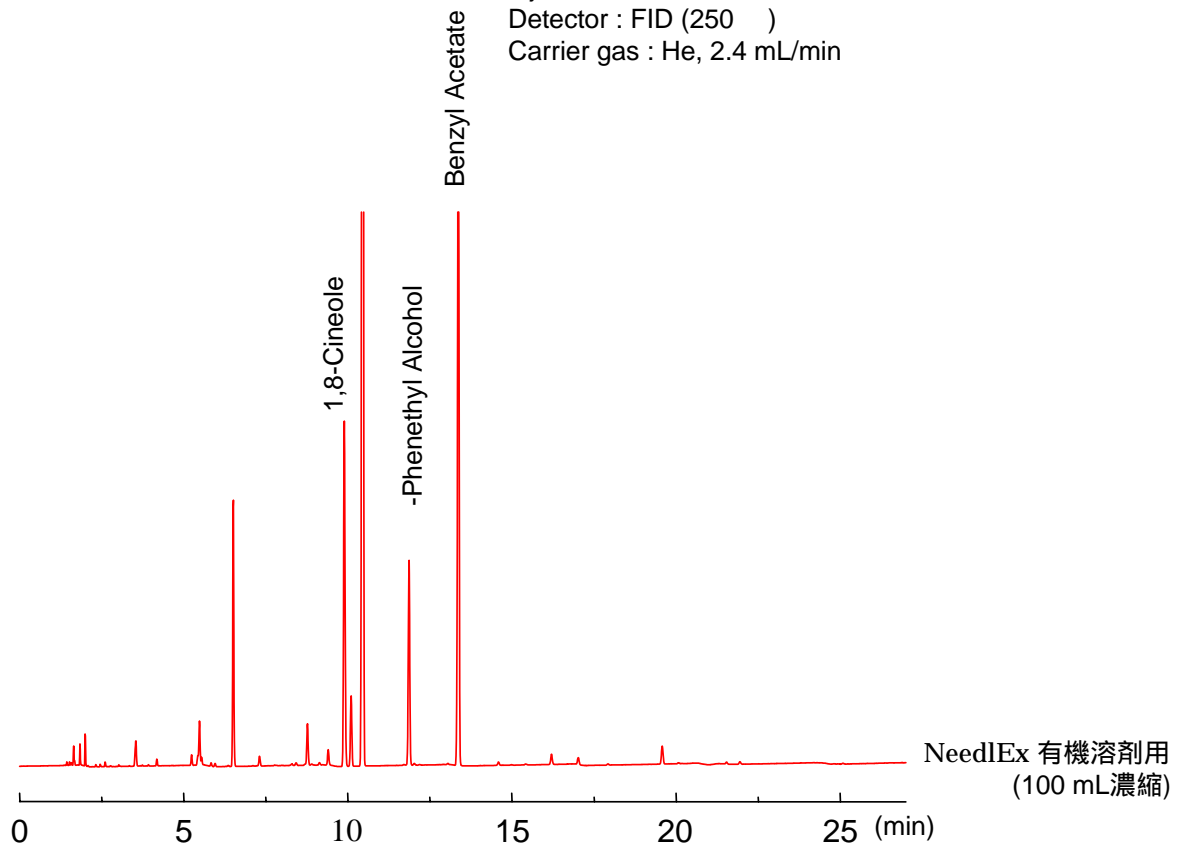

信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2

TEL 075-621-2360

FAX 075-602-2660

e-mail: info@shinwa-cpc.co.jp

URL: http://shinwa-cpc.co.jp/