

沈丁花の香り

沈丁花 (ジンチョウゲ)

学名: *Daphne odora*


分類: ジンチョウゲ科ジンチョウゲ属

中国中部から雲南、ヒマラヤ原産の常緑低木であり、日本には室町時代に渡来したと言われています。名前の由来は、香りのよいことで有名な「沈香」と「丁字」を合わせたほどのよい香りがするところから来ています。



NeedlEx 有機溶剤用 (100 mL濃縮)

Column : ULBON HR-1 30 m x 0.32 mm I.D. 0.25 μ m
Column temp : 50 ~ 200 Program rate 5 /min
Split ratio : 10 : 1
Injection : 200
Detector : FID (250)
Carrier gas : He, 2.4 mL/min

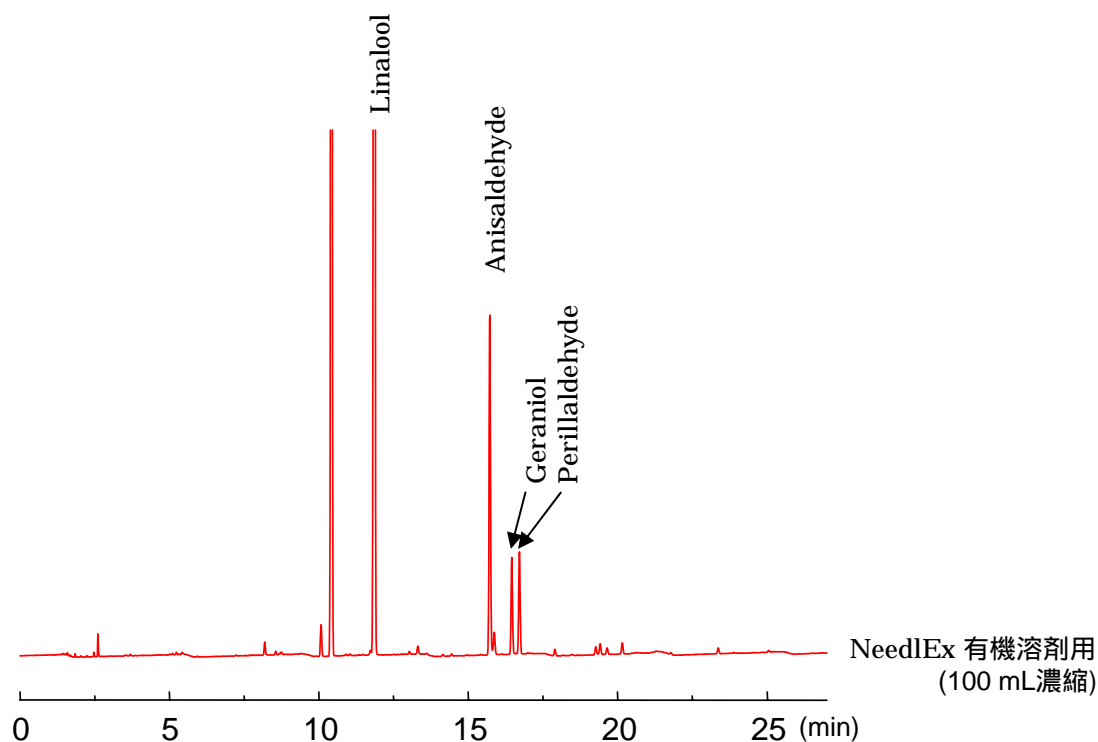

信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2

TEL 075-621-2360

FAX 075-602-2660

e-mail: info@shinwa-cpc.co.jp

URL: <http://shinwa-cpc.co.jp/>