

ローズマリーの香り

ローズマリー

学名: *Rosmarinus officinalis*

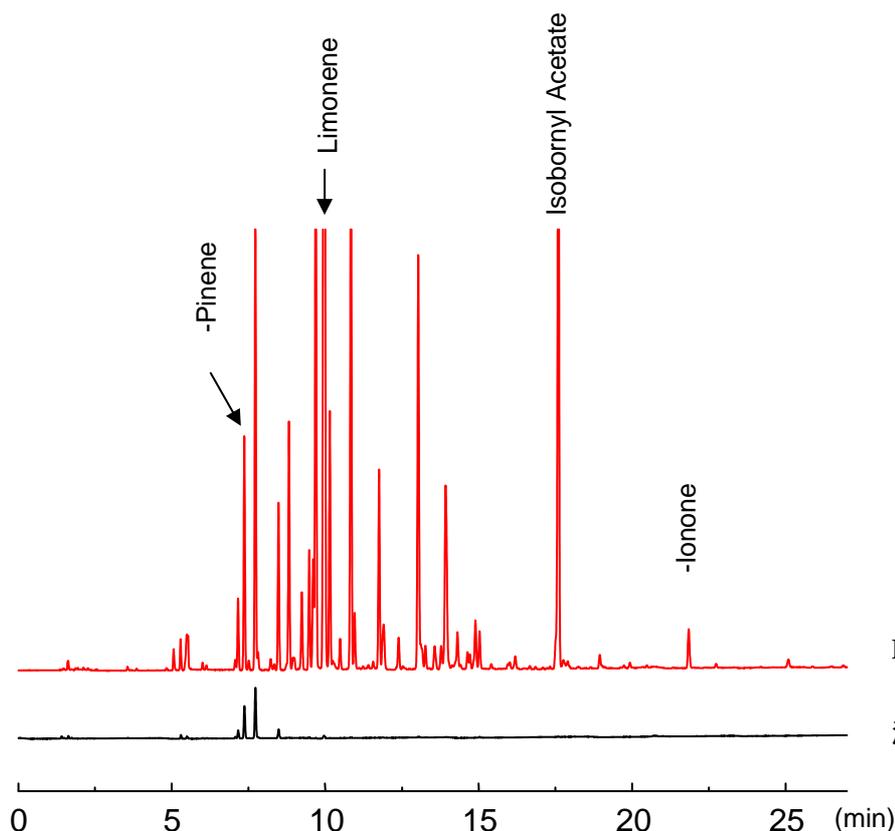
分類: シソ科マンネンロウ属

地中海沿岸の地方を原産とする常緑低木で、古代より薬草として使われていました。樟脳のような刺激のある香りが特徴です。かつて、ヨーロッパではローズマリーの木を1本庭に植えておくだけで魔女除けになるといわれていたため、多くの家の庭先で栽培されていたそうです。



NeedlEx 有機溶剤用 (100 mL濃縮)

Column : ULBON HR-1 30 m x 0.32 mm I.D. 0.25 μ m
Column temp : 50 ~ 200 Program rate 5 /min
Split ratio : 10 : 1
Injection : 200
Detector : FID (250)
Carrier gas : He, 2.4 mL/min

NeedlEx 有機溶剤用
(100 mL濃縮)

濃縮前



信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2

TEL 075-621-2360

FAX 075-602-2660

e-mail: info@shinwa-cpc.co.jp

URL : http://shinwa-cpc.co.jp/