

ペパーミントの香り

ペパーミント

学 名: *Mentha piperita*

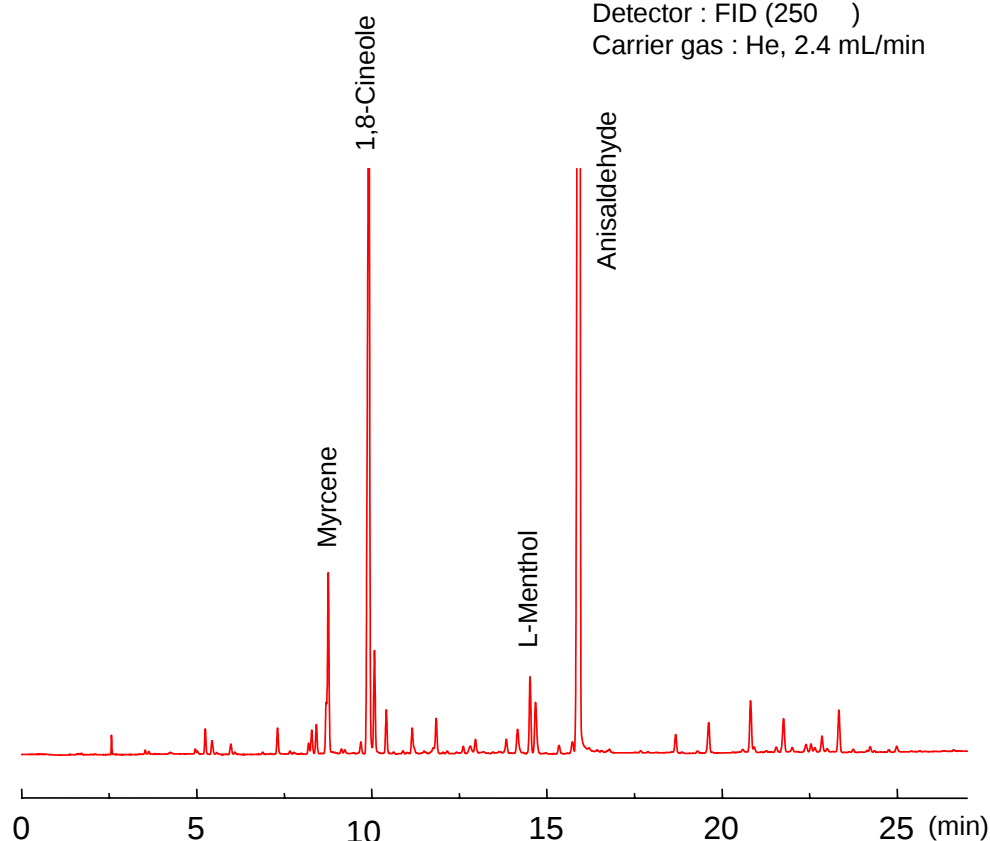
分 類: シソ科ハッカ属

ペパーミントは、ブルガリアが原産国で、日本でもハッカとして北海道など気候の似た場所で栽培され、数多くあるミントの中で最もメントール成分の多いハーブです。ペパーミントの精油は自律神経に作用し、イライラしているとき、不安なときなどに飲むと気分をおだやかにリフレッシュする鎮静の効果があり、消化不良、食べ過ぎ、食欲不振、胸やけなど消化器にもよく作用します。



NeedlEx 有機溶剤用 (100 mL濃縮)

Column : ULBON HR-1 30 m x 0.32 mm I.D. 0.25 μ m
Column temp : 50 ~ 200 Program rate 5 /min
Split ratio : 10 : 1
Injection : 200
Detector : FID (250)
Carrier gas : He, 2.4 mL/min

NeedlEx 有機溶剤用
(100 mL濃縮)

信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2

T E L 075-621-2360

F A X 075-602-2660

e-mail: info@shinwa-cpc.co.jp

U R L : <http://shinwa-cpc.co.jp/>