

SHINWA EXPRESS

品質重視


No. 10002

サンプルカップ褐色シリーズ

サンプルカップに、直射日光や紫外線から試料の変質を防ぐ褐色シリーズをラインナップに追加しました。着色に無機顔料を使用しておらず、従来の褐色バイアルの問題点である試料の吸着を最小限に抑え再現性を向上させています。もちろん溶出試験済みです。

特長

- 直射日光や紫外線による試料の変質を防げます。
- カップ材質は、最高品質のポリプロピレン樹脂を採用しました。プラスチック容器につきものの「溶出」や褐色バイアルにつきものの「試料の吸着」も十分に管理されています。
- セプタムと一体成型のキャップは、材質にニードルが通りやすい軟質ポリエチレンを用い、寸法精度を上げて気密性をさらに高めました。
- キャップ部分は切れ込みを採用していますので針の貫通が容易です。
- 外形サイズは、事実上の世界標準となっている
12φ×32mm、HPLCオートインジェクターでは、
SIL-6B、9A、10A、10Ai、10AXL、10ADVP、20A
およびLC-2010 に適合します。
- 容量は、小容量 200μL と標準形 1.5mL の2種類
からお選びいただけます。
- ディスポーザブル性を考慮した経済的価格設定。
どちらも千個単位で1個当り42 円です。

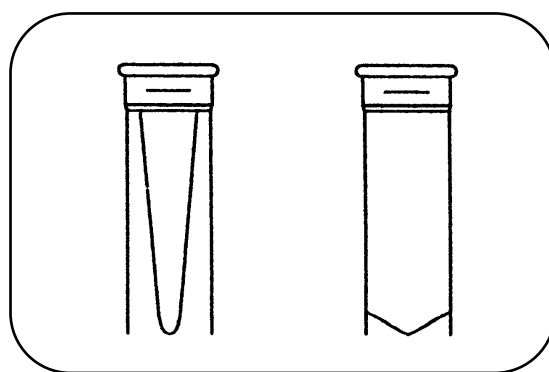

IB (200 μL)

IIB (1.5mL)



価格

品名	容量	価格(1000個入)
サンプルカップ IB (褐色)	200 μL	42,000円
サンプルカップ IIB (褐色)	1.5mL	42,000円



信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町 50番地 2
 TEL 075-621-2360 FAX 075-602-2660
 e-mail: info@shinwa-cpc.co.jp
 URL: http://shinwa-cpc.co.jp/

CN1019A