

SHINWA EXPRESS

Application

2014
September


VOL. 36

ULTRON ES-OVMを用いたescitalopram oxalate (USP method) の分析

Escitalopram oxalateは、うつ病や、強迫性障害 (OCD)、パニック障害、月経前不快気分障害 (PMDD)、不安障害、外傷後ストレス障害などに用いられる抗うつ薬です。放出された神経伝達物質を取り除き、隣接する神経への働きかけを阻止する役割を果たします。

今回ULTRON ES-OVMを用いて逆相モードで分析しました。

Escitalopram oxalate (抗うつ薬)

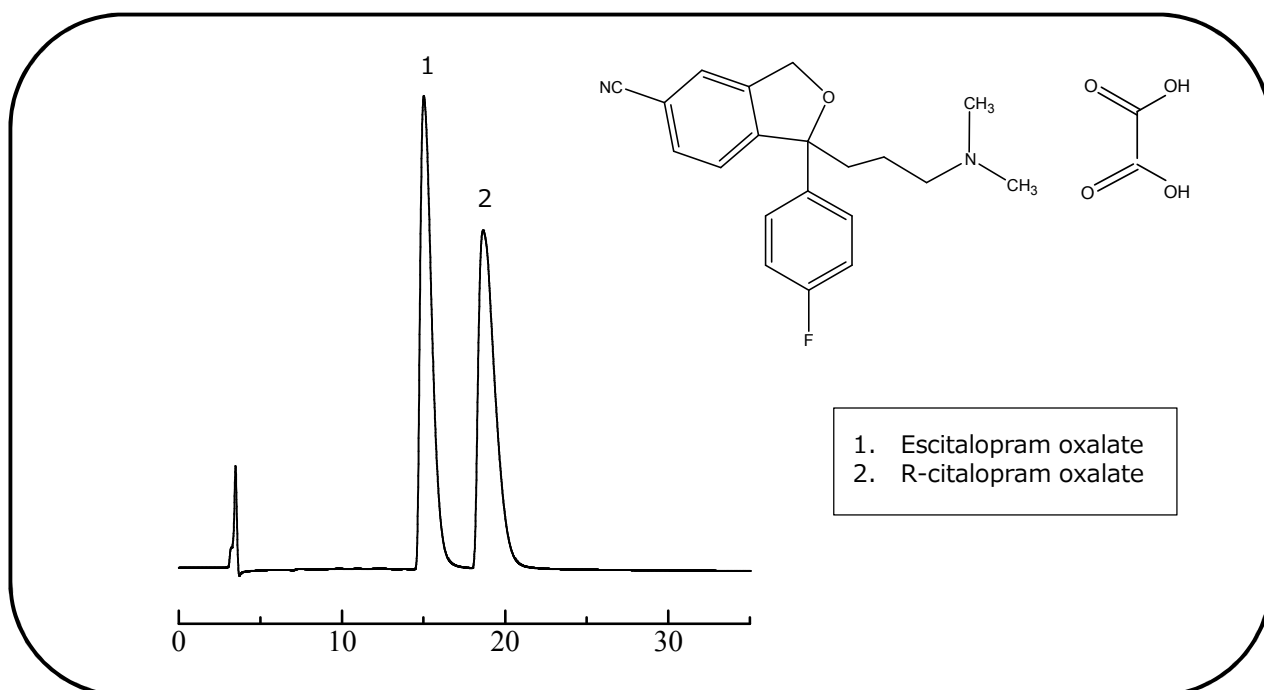

Column:	ULTRON ES-OVM (5 μ m)	Column temp.:	30°C
Column size:	150 mm L x 4.6 mm I.D.	Detection:	UV-240 nm
Mobile phase:	50 mM KH ₂ PO ₄ + 0.2 N NaOH (pH 7.0)/ CH ₃ CN = 17/3	Sample:	125 mg/L (in mobile phase)
Flow rate:	0.6 mL/min	Injection vol.:	15 μ L

●ULTRON ES-OVMの特長

1. ULTRON ES-OVMは光学異性体分離に適したカラムです。
2. 変性に強いタンパク質 (オボムコイド) を^{*}リガンドとして固定相に使用しています。
3. 幅広い不斉識別能を示します。
4. 光学分割のための試料の前処理が不要です。(血漿試料を前処理なしでも分析できます。)
5. 逆相で使用できます。
6. 微量分析 (数ng)が可能です。

*リガンドとは、特定の受容体に特異的に結合する物質のことです。



信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2
TEL: 075-621-2360 FAX: 075-602-2660
E-mail: info@shinwa-cpc.co.jp
URL: http://shinwa-cpc.co.jp/

■分析カラムの仕様■

品名	粒子径 (μm)	カラムサイズ 長さ × 内径 (mm)
ULTRON ES-OVM	5	150 × 2.0
ULTRON ES-OVM	5	150 × 4.6
ULTRON ES-OVM	5	150 × 6.0
ULTRON ES-OVM-C	5	150 × 4.6
ULTRON ES-OVM	10	250 × 4.6
ULTRON ES-OVM Prep (分取用)	10	250 × 20.0

■ガードカラムの仕様■

品名	粒子径 (μm)	カラムサイズ 長さ × 内径 (mm)
ULTRON ES-OVM.G	5	10 × 4.0
ULTRON ES-OVM Prep.G (分取用ガードカラム)	10	15 × 8.0
ULTRON ES-OVM (ガードカートリッジ2個入)	5	5 × 2.0
ガードカートリッジ用ホルダー (アダプタ付き)	5 × 2.0 mmカラム用	
ULTRON ES-OVM (ガードカートリッジ2個入)	5	10 × 4.6
ガードカートリッジ用ホルダー (アダプタ付き)	10 × 4.6 mmカラム用	

●カラム保護 (ガードカラムの推奨)

分析カラムと一緒にガードカラムを使用することで分析カラムを保護し、カラム寿命を延ばすことができます。特に、夾雑物の多いサンプルを分析される場合にはガードカラムの使用が有効となります。頻繁にガードカラムを交換される場合には、カートリッジタイプもございます。ガードカラムは分析カラムの内径と同じサイズか少し小さいものをご使用ください。

●「ULTRON ES-OVM-C」

出荷検査はUSP基準に則り、clopidogrel bisulfateの分離を確認しています。

(Performance Report添付)



分析相談、カラムスクリーニング、デモカラムの相談も承ります。

仕様及び価格は予告なしに変更をさせていただく場合がございます。予めご了承ください。