

SHINWA EXPRESS

Application


2016
J u l y

VOL. 87

ULTRON ES-OVMを用いたTolperisone hydrochlorideの分析

トルペリゾン塩酸塩は、筋肉を緊張させている神経をしずめる効果があります。骨格筋弛緩薬の一つで、筋肉がこわばる病気や腰痛、肩こり、五十肩、緊張型頭痛などの治療に用いられています。今回、ULTRON ES-OVMを用いて逆相モードで分析しました。

Tolperisone hydrochloride (痙性麻痺治療薬)

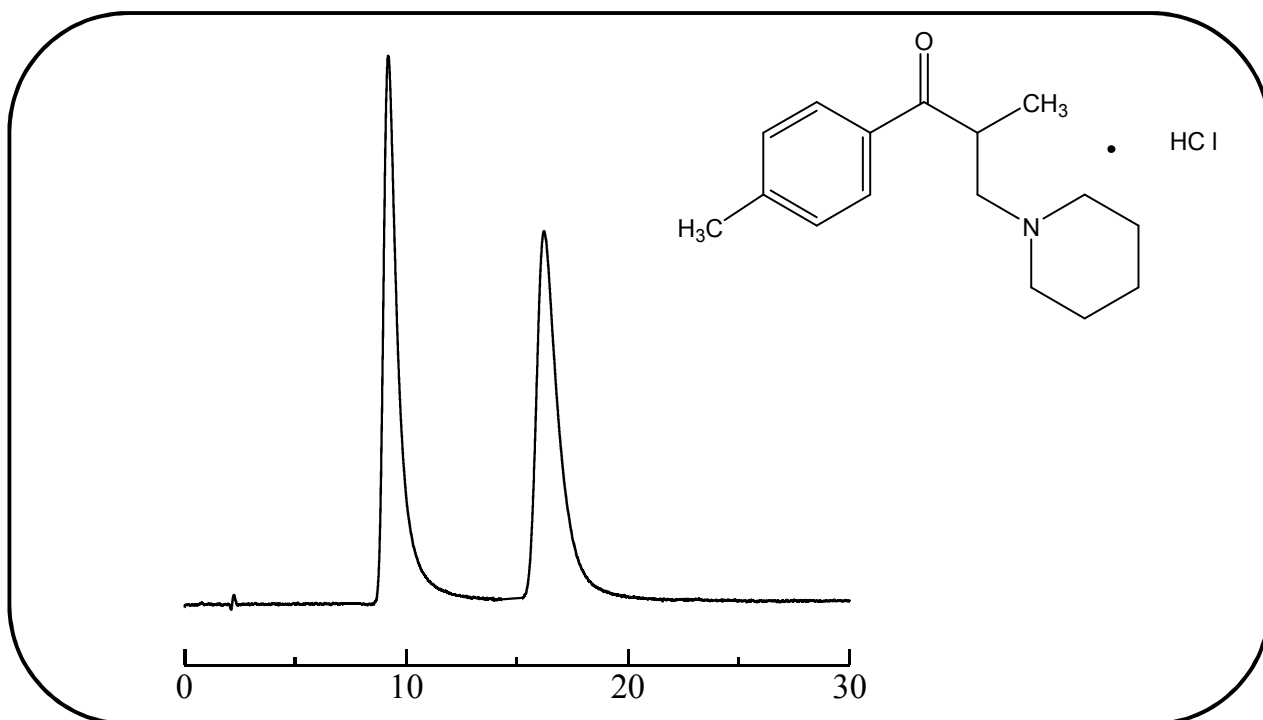

Column: ULTRON ES-OVM (5 μ m)
 Column size: 150 mm L x 4.6 mm I.D.
 Mobile phase: 20 mM KH_2PO_4 + 20mM K_2HPO_4 (pH 5.5)/ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ = 95/5
 Flow rate: 1.0 mL/min

Column temp.: 25°C
 Detection: UV-257 nm
 Sample: 200 mg/L (in ethanol)
 Injection vol.: 2 μ L

●ULTRON ES-OVMの特長

1. ULTRON ES-OVMは光学異性体分離に適したカラムです。
2. 変性に強いタンパク質（オボムコイド）を*リガンドとして固定相に使用しています。
3. 幅広い不斉識別能を示します。
4. 光学分割のための試料の前処理が不要です。（血漿試料を前処理なしでも分析できます。）
5. 逆相で使用できます。
6. 微量分析（数ng）が可能です。

*リガンドとは、特定の受容体に特異的に結合する物質のことです。



信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2
 TEL: 075-621-2360 FAX: 075-602-2660
 E-mail: info@shinwa-cpc.co.jp
 URL: http://shinwa-cpc.co.jp/

■分析カラムの仕様■

品名	粒子径 (μm)	カラムサイズ 長さ × 内径 (mm)
ULTRON ES-OVM	5	150 × 2.0
ULTRON ES-OVM	5	150 × 4.6
ULTRON ES-OVM	5	150 × 6.0
ULTRON ES-OVM-C	5	150 × 4.6
ULTRON ES-OVM	10	250 × 4.6
ULTRON ES-OVM Prep (分取用)	10	250 × 20.0
ULTRON ES-OVM-3	3	お問い合わせ下さい

■ガードカラムの仕様■

品名	粒子径 (μm)	カラムサイズ 長さ × 内径 (mm)
ULTRON ES-OVM.G	5	10 × 4.0
ULTRON ES-OVM Prep.G (分取用ガードカラム)	10	15 × 8.0
ULTRON ES-OVM (ガードカートリッジ2個入)	5	5 × 2.0
ガードカートリッジ用ホルダー (アダプタ付き)	5 × 2.0 mmカラム用	
ULTRON ES-OVM (ガードカートリッジ2個入)	5	10 × 4.6
ガードカートリッジ用ホルダー (アダプタ付き)	10 × 4.6 mmカラム用	

●カラム保護 (ガードカラムの推奨)

分析カラムと一緒にガードカラムを使用することで分析カラムを保護し、カラム寿命を延ばすことができます。特に、夾雑物の多いサンプルを分析する場合にはガードカラムの使用が有効となります。頻繁にガードカラムを交換する場合には、カートリッジタイプもごございます。ガードカラムは分析カラムの内径と同じサイズか少し小さいものをご使用ください。

●「ULTRON ES-OVM-C」

出荷検査はUSP基準に則り、clopidogrel bisulfateの分離を確認しています。
(Performance Report添付)



分析相談、カラムスクリーニング、デモカラムの相談も承ります。

仕様及び価格は予告なしに変更をさせていただく場合がございます。予めご了承ください。