

SHINWA EXPRESS

Information

 2016
August

VOL. A11

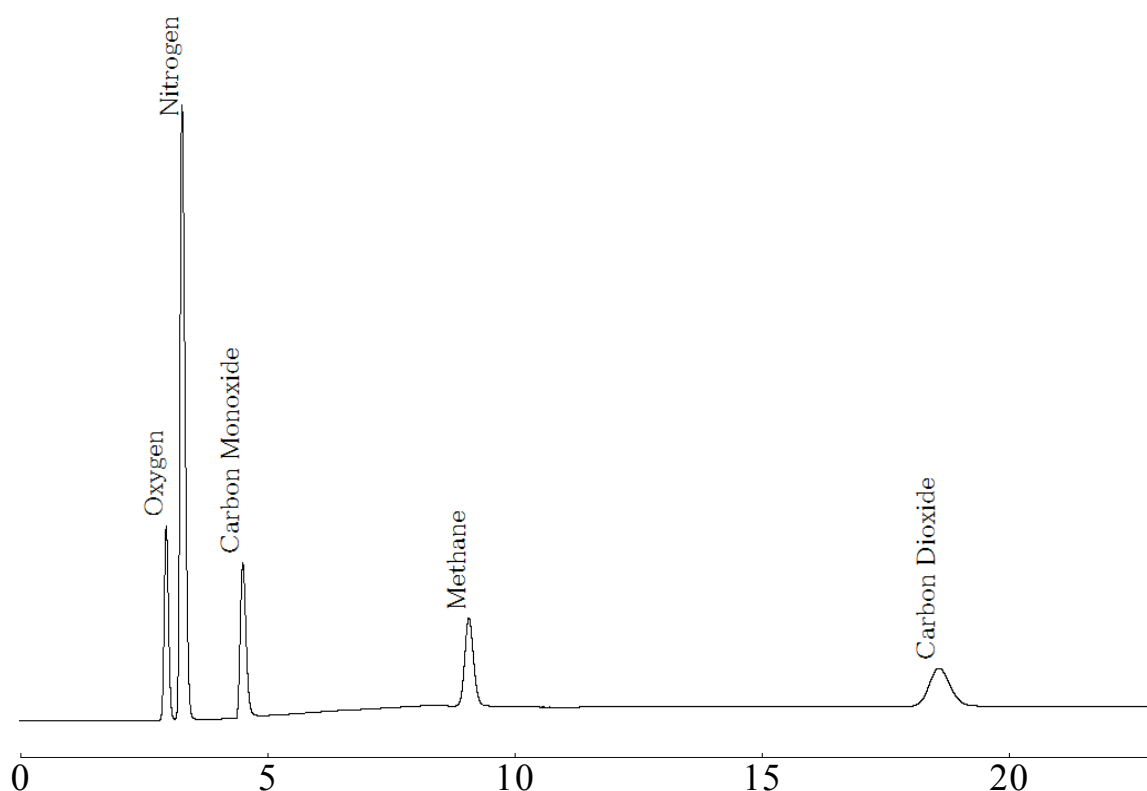
MICROPACKED-ST 3.0m

NEW

MICROPACKEDシリーズにMICROPACKED-ST 3.0mがラインナップに加わりました
MICROPACKED-ST 2.0mに比べて、O₂, N₂の分離が向上し完全分離します

■ 特長

- ・ キャピラリー専用GC装置で、H₂, O₂, N₂, CO, CH₄, CO₂, N₂O, C₂H₂, C₂H₄, C₂H₆を同時分析で完全分離ができます
- ・ Shincarbon-STを充填しています
- ・ 特殊フィルターを装着していますので、カラム端からの微粉流出がなくお客様の大切な検出器を汚しません

MICROPACKED-ST 3.0 m


Column: 3.0 m x 1.0 mm I.D. Stainless
Carrier gas: He 300 kpa
Column temp.: 35°C (3.5min Hold) to 80°C Program rate 10°C/min
Detector: TCD 80mA 100°C

Sample: permanent gases
Split: 5 : 1
Injection port temp.: 100°C
Injection volume: 0.05 mL


信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2
TEL: 075-621-2360 FAX: 075-602-2660
E-mail: info@shinwa-cpc.co.jp
URL: http://shinwa-cpc.co.jp/

■仕様と価格■

品名	材質	サイズ	価格
MICROPACKED-ST	ステンレス	2.0 m x 1.0 mm I.D.	67,000円
		3.0 m x 1.0 mm I.D.	82,000円
MICROPACKED-MS		2.0 m x 1.0 mm I.D.	67,000円

上記価格は2016年8月2日時点での価格になります。
価格または分析相談につきましては、お問い合わせ下さい。



仕様は予告なしに変更をさせていただく場合がございます。予めご了承ください。