

SHINWA EXPRESS


Application

VOL. 215

Sunpak-A を用いたN₂OとNO₂の分析

Sunpak-A はエチルビニルベンゼン-ジビニルベンゼン共重合体ガスクロマトグラフィー用ポリマー系充填剤です。今回は、Sunpak-Aを用いたN₂OとNO₂の分析例をご紹介します。

Sunpak-A 80/100 mesh

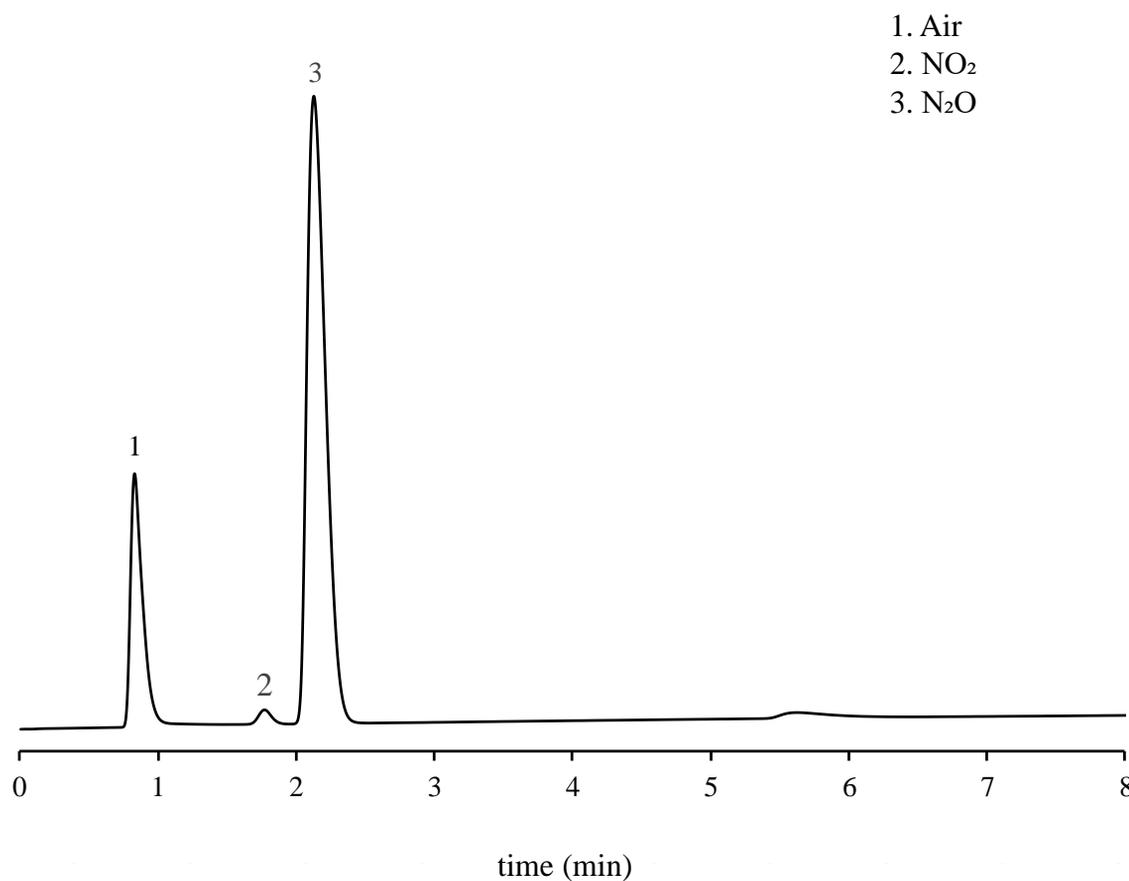

Column: 2.0 m x 3.0 mm I.D. Glass
Column temp.: 50°C
Injection port temp.: 80°C

Detector: TCD 80°C
Carrier gas: 30 mL/min He
Sample vol.: 0.1 mL