

# SHINWA EXPRESS


*Application*

VOL. 219

## Sunpak-H を用いた変性アルコールの分析

Sunpak-Hはスチレン-ジビニルベンゼン共重合体ガスクロマトグラフィー用ポリマー系充填剤です。今回は、Sunpak-Hを用いた変性アルコールの分析例をご紹介します。

Sunpak-H 60/80 mesh

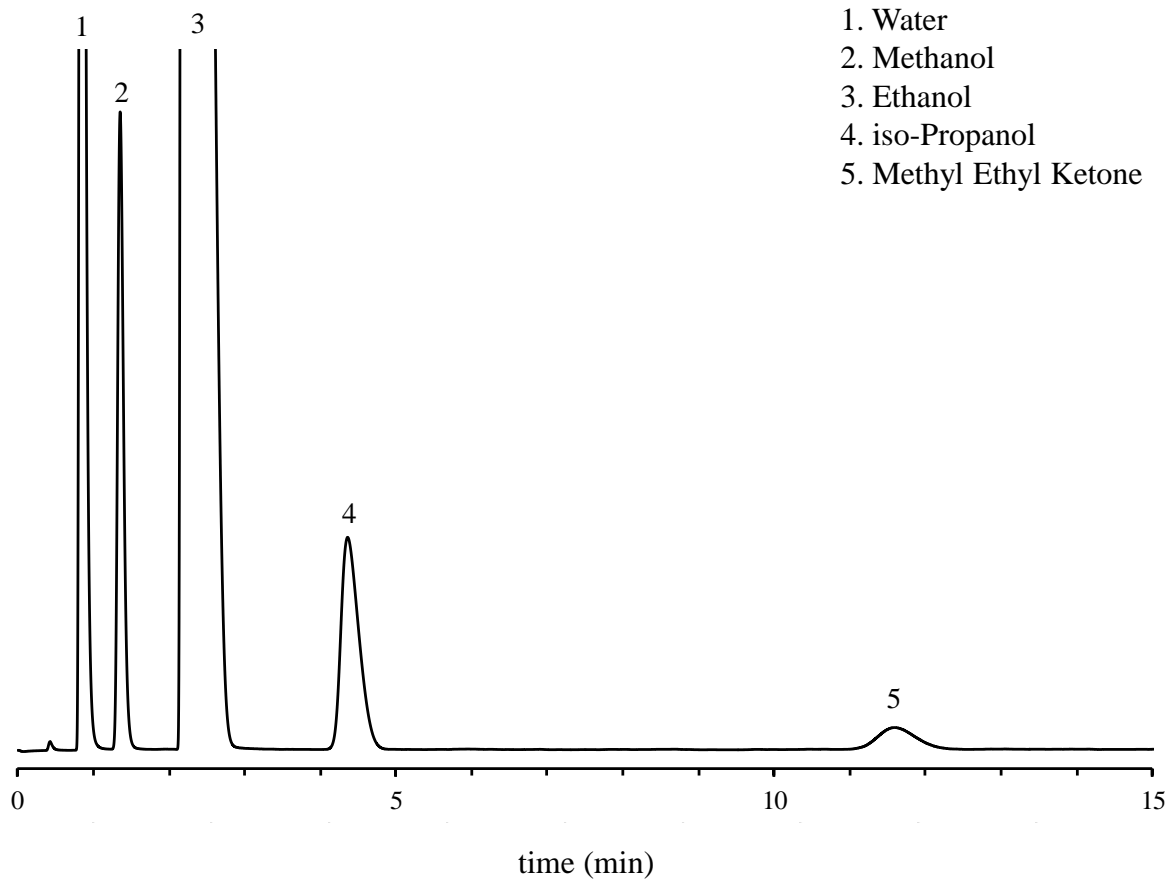

Column: 2.0 m x 3.0 mm I.D. Glass  
Column temp.: 120°C  
Injection port temp.: 200°C

Detector: TCD 200°C  
Carrier gas: 50 mL/min He  
Sample vol.: 1.0 µL

**信和化工株式会社**

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2  
TEL: 075-621-2360 FAX: 075-602-2660  
E-mail: info@shinwa-cpc.co.jp  
URL: <https://shinwa-cpc.co.jp/>