
LC column

SHINWA EXPRESS Application
VOL. 286

ULTRON ES-AmyCL-DM を用いた Donepezil HClの分析

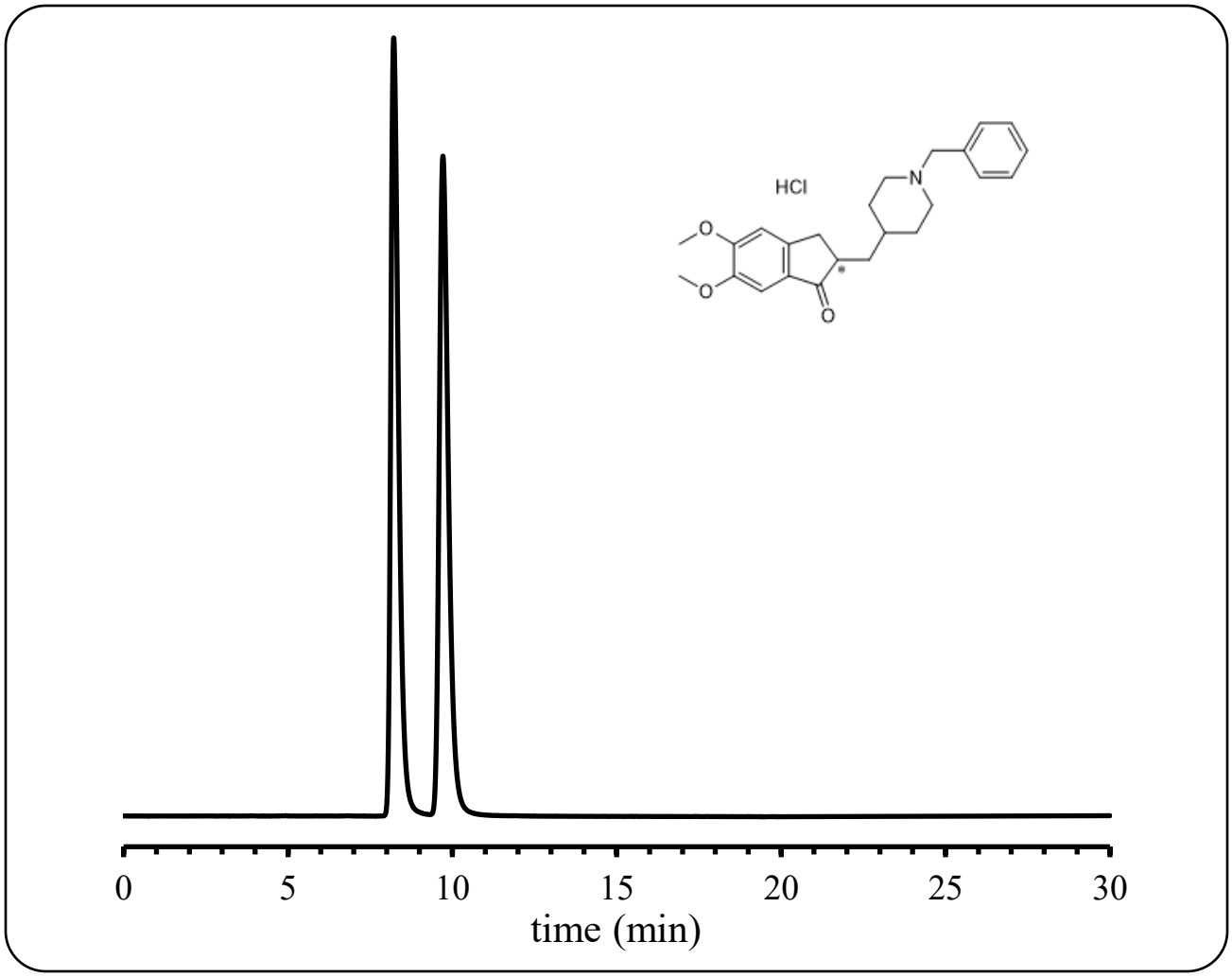

Column:	ULTRON ES-AmyCL-DM (5 µm)	Detection:	UV-300 nm
Column size:	250 mmL x 4.6 mm I.D.	Sample:	Donepezil HCl (1000 mg/L)
Mobile phase:	n-Hexane/EtOH/DEA = 70/30/0.1	Diluent:	mobile phase
Flow rate:	1.0 mL/min	Injection vol.:	10 µL
Column temp.:	25℃		

●ULTRON ES-AmyCL-DMの特徴

1. 汎用性の高い異性体分離検討用カラムです
2. DMSOなど、強力な可溶化溶媒を始めとした幅広い有機溶媒が使用可能です
3. USPカラムリストL99に該当します

信和化工株式会社
〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2
TEL：075-621-2360 FAX：075-602-2660
E-mail : info@shinwa-cpc.co.jp
URL : https://shinwa-cpc.co.jp/

■Analytical column specifications■

ULTRON ES-Amy-DM / ES-Cel-DM / ES-AmyCL-DM / ES-CelCL-DM

Product name	Particle size (μm)	Column dimensions Length x I.D. (mm)
ULTRON ES-Amy-DM	5	150×4.6
		250×4.6
	10	250×4.6
ULTRON ES-Cel-DM	5	150×4.6
		250×4.6
	10	250×4.6
ULTRON ES-AmyCL-DM	5	150×4.6
		250×4.6
	10	250×4.6
ULTRON ES-CelCL-DM	5	150×4.6
		250×4.6
	10	250×4.6

※　その他のカラムサイズに関しては、お問い合わせください。
分析に関するご相談も承ります。



仕様及び価格は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。

信和化工株式会社
https://shinwa-cpc.co.jp/